

Mode d'emploi

Instruction manual



VEINOPUS

Model 1.2

SOMMAIRE

• SYMBOLES	4
• FONCTIONS ET UTILISATION	4
• INDICATIONS ET EFFETS BÉNÉFIQUES	4
• CONTRE-INDICATIONS ET MISE EN GARDE	5
• SÉCURITÉ.....	5
• MODE D'UTILISATION	5
• DESCRIPTION DE L'APPAREIL.....	7
• ACCESSOIRES	8
• RISQUES LIES A LA MISE AU REBUT DES ACCESSOIRES OU DE L'APPAREIL	9
• PRÉCAUTIONS D'EMPLOI, STOCKAGE ET TRANSPORT	9
• ENTRETIEN	10
• GARANTIE.....	10
• SCHÉMA	19

SYMBÔLES



Prière de lire le mode d'emploi avant utilisation de cet appareil



Appareil de type BF (standard IEC N° 601-1) à source d'alimentation interne et à usage continu, avec un degré de protection IPX0 contre la pénétration d'eau



Indication sortie câble (RJ 45 4 pôles)



Réglage de l'intensité de sortie



Marche/Arrêt

FONCTIONS ET UTILISATION

La fonction de VEINOPLUS est de stimuler les muscles via les nerfs moteurs par impulsions électriques.

Son action est de provoquer la contraction des muscles du mollet. Ces contractions qui sont ressenties comme des pulsations, compressent les veines profondes assurant ainsi le retour veineux.

Qui peut utiliser VEINOPLUS ?

Personnes souffrant de sensations de jambes lourdes, d'œdèmes des pieds et des jambes causés par :

- Station assise ou debout prolongée (bureau, voyages en avion)
- Manque d'exercice physique (absence ou manque de marche)
- Grossesse
- Traitement hormonal
- Excès de chaleur
- Obésité

INDICATIONS ET EFFETS BÉNÉFIQUES

VEINOPLUS améliore le retour veineux ayant pour effet :

- > L'élimination des sensations douloureuses dans les membres inférieurs
- > La diminution des œdèmes des pieds et des jambes
- > La prévention de la thrombose veineuse (DVT)
- > La prévention de la stase veineuse

CONTRE-INDICATIONS ET MISE EN GARDE

Contre-indications :

- Les personnes portant un stimulateur cardiaque
- Les personnes affectées de lésions malignes évolutives

Mise en garde :

Si vous souffrez d'une des affections suivantes (ou en cas de doute) consultez votre médecin avant d'utiliser VEINOPLUS :

- Thrombose veineuse (phlébite) en poussée aiguë
- Tendance hémorragique induite par un traitement anticoagulant
- Sciatique ou toute autre névralgie
- Inflammation, infection, cicatrice, varices à un stade avancé, lésion cutanée sur la partie des mollets où les électrodes seront appliquées : dans ces cas, ne pas appliquer les électrodes directement sur les zones affectées, mais à proximité

Précautions et limitations :

- VEINOPLUS est conçu spécialement pour la stimulation des jambes mais il peut être aussi utilisé pour les bras
- Ne pas utiliser sur la tête, la poitrine, l'abdomen ou le cou
- Utiliser VEINOPLUS près de l'aire cardiaque peut augmenter les risques de fibrillation ventriculaire
- Ne pas laisser à la portée des enfants

SÉCURITÉ

VEINOPLUS délivre une énergie électrique à la surface de la peau par les électrodes qui provoquent des contractions musculaires locales.

Les impulsions produites par VEINOPLUS véhiculent de très faibles quantités d'énergie électrique en toute sécurité et inférieures aux normes internationales les plus strictes . L'utilisation d'accessoires ou d'éléments non recommandés peut rendre VEINOPLUS inefficace sans toutefois affecter sa sécurité.

MODE D'UTILISATION (voir schéma page 19)

- 1 **Relier le câble** à la sortie située sur le haut de l'appareil (7)
Brancher les électrodes VEINOPLUS PACK à l'extrémité du câble
- 2 **Placer une électrode** sur chacun des mollets
- 3 **S'installer confortablement** (le traitement dure 20 minutes)
Position idéale : assis ou allongé, jambes détendues


- 4 **Allumer l'appareil** en appuyant sur le bouton « marche/arrêt » (1)
5 **Réglage de l'intensité** : pour augmenter appuyez sur le bouton **+**, pour diminuer appuyez sur le bouton **-** (2)

Vous devez augmenter l'intensité jusqu'à ressentir au niveau des mollets un léger mais profond battement musculaire qui peut être différent d'un mollet à l'autre; il faut régler l'intensité par rapport au mollet le plus sensible. Vous pouvez diminuer l'intensité en cours de traitement si les battements deviennent trop forts.

- 6 **Durée et rythme du traitement** : 20 minutes au total pendant lesquelles le rythme préprogrammé des pulsations va augmenter. L'appareil s'éteint automatiquement après 20 minutes
7 **Quand utiliser VEINOPLUS ?** Quotidiennement et en cas de besoin, sans limitation d'usage car il n'y a pas de risque lié à un usage intensif; son utilisation est particulièrement recommandée au cours et après un vol long courrier (jusqu'à deux semaines après le vol)
8 **Arrêt en cours de traitement** : si pour quelque raison que ce soit vous souhaitez éteindre VEINOPLUS appuyez sur le bouton « marche/arrêt » (1)
9 **L'efficacité du traitement dépend :**

- Du bon placement et de la bonne qualité des électrodes (n'utiliser que les électrodes VEINOPLUS PACK).
 - Du bon réglage de l'intensité de l'appareil (qui doit entraîner un léger battement des muscles profonds du mollet).
- En cas de peau sèche, humidifiez la avec de l'eau afin d'améliorer les effets de la stimulation.

Le traitement peut être rendu encore plus efficace par le port de demi-bas ou chaussettes de contention pendant l'électro-stimulation. Les électrodes doivent être collées directement sur la peau et non sur les bas.

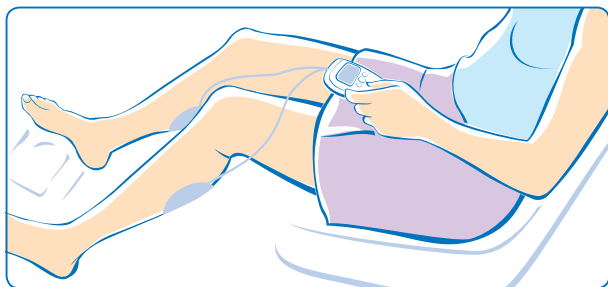

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

VEINOPLUS est un appareil d'électro-stimulation qui délivre un courant spécifique de basse fréquence et de faible voltage. Le signal électrique du VEINOPLUS est une synthèse hautement perfectionnée d'impulsions. Il génère un battement musculaire efficace et inoffensif des mollets qui facilite le retour veineux.

VEINOPLUS est alimenté par une pile alcaline de 9V. La charge de la pile n'excède pas 0,3W. Les paramètres de stimulation sont stables pendant toute la durée de vie de la pile.

Caracteristiques (voir schéma page 19) :

- Un bouton « marche/arrêt » (1)
- Deux boutons de réglage d'intensité (2)
- Un écran LCD qui permet de visualiser l'intensité de la stimulation (3), une barre verticale apparaît sur l'écran à chaque battement musculaire
- La durée du traitement restant à courir (4)
- Un témoin d'usure de pile (5)
- Un compteur d'utilisations (6)
- Un canal de stimulation isolé (7)
- Deux électrodes (8)

Une minuterie interne arrête VEINOPLUS automatiquement après 20 minutes

Paramètres de sortie de VEINOPLUS :

- Le courant de basse fréquence est modulé dans une bande de 1 Hz à 250 Hz
- L'onde du courant des impulsions (en cours d'utilisation) est quasi symétrique biphasée AC.
- L'onde de la tension des impulsions est rectangulaire et mono-polaire.
- La durée d'impulsions varie de 25 à 240 microsecondes.
- Pendant les impulsions, la valeur de crête de tension instantanée est de 45 volts $\pm$ 10% quand la sortie est chargée avec une impédance variant de 250 ohms à 10.000 ohms

Résultats obtenus avec VEINOPLUS chargé avec une résistance de 500 Ω :

- La valeur effective du voltage de sortie AC est inférieure à 2V r.m.s. avec 5 secondes d'intervalle.
- La valeur effective de l'intensité du courant de sortie ne dépasse pas 4mA r.m.s. sur 5 secondes et peut atteindre (pendant les impulsions) une valeur de crête de 90 mA $\pm$ 10%.
- La valeur r.m.s. maximale de la densité du courant pour les électrodes VEINOPLUS PACK ne dépasse pas 0,2 mA/cm².

- La puissance de sortie AC de VEINOPLUS est limitée à 0,01 W r.m.s.
- La puissance de sortie DC de VEINOPLUS est limitée à 0,0001 W.

Fréquences des contractions musculaires

La fréquence des contractions musculaires est similaire au rythme cardiaque. Elles sont programmées pour accélérer lors de chaque utilisation de 60 BPM (Battements par minute) pendant les 5 premières minutes, à 75 BPM pendant les 5 minutes suivantes, puis à 90 BPM pendant les 5 minutes suivantes et enfin à 105 BPM pendant les dernières 5 minutes. Ces rythmes de pulsations correspondent à des fréquences variant de 1 Hz à 1,75Hz.

LES ACCESSOIRES

VEINOPLUS est livré avec tous les accessoires nécessaires à un traitement facile, sûr et efficace. **Il inclut 2 électrodes VEINOPLUS PACK autocollantes, un câble, une pile alcaline 9V et un mode d'emploi.** Selon la réglementation des transports en vigueur dans certains pays, VEINOPLUS peut être livré sans pile.

Les électrodes et leur utilisation :

Les électrodes VEINOPLUS PACK sont réutilisables. Il est recommandé qu'un jeu d'électrodes soit toujours utilisé par la même personne. Les électrodes doivent être changées dès qu'elles ne collent plus suffisamment ou deviennent sales. Les instructions spécifiques sur l'utilisation et l'entretien des électrodes sont incluses dans le sachet d'origine.

Electrodes recommandées :

L'appareil a été testé cliniquement et son efficacité est optimale lorsqu'il est utilisé avec les électrodes VEINOPLUS PACK 8X13. Pour un traitement efficace et inoffensif, il est recommandé d'utiliser uniquement les électrodes VEINOPLUS PACK d'origine. Aucune autre marque ou taille d'électrodes ne sont recommandées pour être utilisées avec VEINOPLUS. S'assurer que les électrodes utilisées sont emballées dans leur sachet d'origine scellé. Si par erreur un autre type d'électrodes est utilisé avec VEINOPLUS, son efficacité peut être sensiblement affectée sans toutefois altérer sa sécurité d'emploi. Grâce aux circuits électroniques de VEINOPLUS, la densité du courant transmis au contact de l'électrode est automatiquement limitée quand il est utilisé avec des électrodes de taille non conforme. L'utilisation de plaques métalliques à la place d'électrodes auto collantes est réservée aux professionnels de la santé et sous leur seule responsabilité.

Remplacement de la pile :

Lorsque la pile 9V est usée (voltage < 6V), le témoin d'usure de la pile commence à clignoter sur l'écran. Changez la pile à la fin de la séance ou quand l'appareil s'arrête.

Pour remplacer la pile aucun outil n'est nécessaire ; ouvrez le compartiment situé à l'arrière de l'appareil et insérez la nouvelle pile en respectant sa polarité. Il est recommandé d'utiliser des piles alcalines 9V de types 6LR61, 6LF22, AM6, MN1604 ou GP1604. Si des piles autres que celles recommandées sont utilisées, VEINOPLUS pourrait cesser de fonctionner ou s'éteindre prématurément sans toutefois affecter sa sécurité d'emploi.

Remplacement du câble d'alimentation :

Le câble d'alimentation fourni avec VEINOPLUS peut être remplacé auprès de votre pharmacien ou votre distributeur agréé.

RISQUES LIES A LA MISE AU REBUT DES ACCESSOIRES OU APPAREILS USAGES

Il n'y a pas de risques particuliers se rapportant à l'utilisation ou la mise au rebut des accessoires ou appareils usagés, à l'exception des piles. Les précautions suivantes concernent uniquement les piles :

- La pile ne doit pas être exposée à une température supérieure à 65°C.
- Si votre appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, retirer la pile.
- La pile utilisée dans VEINOPLUS ne doit pas être rechargée,
- La pile ne doit pas être jetée dans les flammes car elle pourrait exploser,
- La pile ne doit pas être mise en court-circuit, car elle peut causer des brûlures ou constituer un risque d'incendie.
- La pile peut exploser, prendre feu ou couler et causer des blessures si elle est manipulée de manière incorrecte.
- Les piles usagées doivent être déposées dans un point de recyclage approprié afin de préserver l'environnement.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI, STOCKAGE ET TRANSPORT

- Ne pas utiliser VEINOPLUS en présence d'un appareil d'électro-chirurgie en marche.
- Ne pas utiliser aux abords (<0,5m) d'un four à micro-ondes en marche.
- VEINOPLUS n'a pas produit d'interférences magnétiques excessives (EMI) lors des tests établis selon les normes EN 60601-1-2: 2001. Cependant, il est possible que des EMI apparaissent dans des environnements sensibles.

- L'appareil a été conçu en vue d'une utilisation dans une gamme de température ambiante comprise entre +5 à +40°C et 30 à 70% d'humidité relative.
- VEINOPLUS doit être conservé et transporté dans une gamme de température ambiante comprise entre -5 et +40°C avec une humidité relative < 70%.

ENTRETIEN ET SERVICE APRES VENTE

VEINOPLUS ne requiert ni entretien ni réglage particuliers. En cas de besoin, utilisez un chiffon légèrement alcoolisé pour nettoyer ou désinfecter l'appareil.

Le service après vente est assuré par Ad Rem Technology ou ses représentants agréés qui sur demande, pourront fournir la liste des composants, schémas et matériaux nécessaires pour la réparation. Toute demande de service après vente devra mentionner l'année de fabrication et le numéro de série de l'appareil ; ces numéros sont inscrits dans le compartiment à pile à l'arrière de l'appareil.

GARANTIE

VEINOPLUS est garanti 12 mois (le ticket d'achat faisant foi) contre tout vice de fabrication, sauf la pile, le bris de verre, l'usure normale ainsi que tout dommage dû à un mauvais traitement ou à des interventions par des tiers non habilités.

Pour obtenir la réparation ou le remplacement de votre appareil sous garantie, veuillez le retourner avec son ticket d'achat au FABRIQUANT et IMPORTATEUR européen :

Ad Rem Technology

22, rue Cambon - 75001 Paris - France

tél +33 (0)1 42 60 00 22 - fax +33 (0)1 42 60 00 63

www.adremtechnology.com

SUMMARY

• SYMBOLS	12
• FUNCTION AND INTENDED APPLICATION	12
• INDICATIONS AND BENEFITS	12
• CONTRA-INDICATIONS AND WARNINGS	13
• SAFETY	13
• HOW TO USE VEINOPLUS	13
• TECHNICAL DESCRIPTION	15
• ACCESSORIES	16
• RISKS ASSOCIATED WITH DISPOSAL OF ACCESSORIES OR PRODUCT	17
• ENVIRONMENTAL CONDITIONS FOR USE, STORAGE AND TRANSPORT	17
• SERVICE	18
• WARRANTY	18
• PICTURE	19

SYMBOLS



Read the instructions before using the device



A device type BF (IEC standard N° 601-1) with an internal power supply and intended for continuous use with IPX0 degree of protection against water penetration



Cable outlet indication (4 pole RJ 45)



Adjustment of intensity



ON/OFF switch

FUNCTION AND INTENDED APPLICATION

The **function** of VEINOPLUS is to electrically stimulate muscles via motor nerves. Its **intended application** is to cause contractions of calf muscles in legs. These calf contractions, which feel like pulsations, compress deep veins and result in pumping of venous blood against gravity.

Who can benefit from VEINOPLUS ?

People suffering from swelling and pain sensation in legs due to:

- Prolonged sitting or standing (office, air travel)
- Lack of physical activity
- Pregnancy
- Hormone therapy
- Body overheating
- Obesity

INDICATIONS AND BENEFITS

VEINOPLUS improves venous blood return, which results in:

- Control of pain sensations in legs
- Reduction of swelling (œdemas) of feet and ankles
- Prevention of Deep Venous Thrombosis (DVT)
- Prevention of venous stasis

CONTRA-INDICATIONS AND WARNINGS

Contra-indications:

- People with **implanted cardiac pacemakers**.
- Patients undergoing anti-cancer therapy.

Warnings:

If you are suffering from one of the following conditions or if in doubt, consult a physician before using VEINOPLUS:

- Acute venous thrombosis
- Tendency to bleeding induced by anti - clotting treatment
- Sciatica or any other neuralgia
- Inflammation, infection, skin lesions, or severe varicose veins of the calves: in these instances you may apply the electrodes next to, but not onto the affected area

Precautions and limitations:

- The use of VEINOPLUS is limited to the legs as well as arms in certain cases
- It is not intended for application on head, chest, abdomen or neck
- Use of VEINOPLUS near a heart region may increase the risk of ventricular fibrillation
- Keep out of reach of children

SAFETY

The VEINOPLUS produces electrical impulses and delivers energy to the surface of the skin by means of its electrodes, which cause local muscular contractions. The impulses from VEINOPLUS carry very low quantities of electrical energy. Their energies are below any international standard safety limits. The use of unauthorized accessories or materials may render VEINOPLUS ineffective, but it will not degrade its safety.

HOW TO USE VEINOPLUS (see picture on page 19)


- 1 **Connect the cable** to the outlet located on the top of the unit (7)
Connect the electrodes to the electrode end (the one with pins) of the cable
- 2 **Stick each of the electrodes** to the central part of the calf muscle on the back of legs

- 3 **Make yourself comfortable:** the treatment lasts 20 minutes. The ideal positions are: seated with the legs slightly extended or lying down
- 4 **Switch ON the stimulator** by pressing the ON/OFF button (1)
- 5 **The intensity may be adjusted** using the two push buttons (2). To increase intensity, press the button marked **+**, to decrease it, press the button marked **-**

You should increase the intensity until you feel light but deep muscular pulsations in your calves. They may vary between one calf and the other. The intensity should be adjusted in relation to the more sensitive of the two calves. You can decrease the intensity, if the pulsations become too strong.

- 6 **Duration:** 20 minutes, during which the rate of pulsations changes every 5 minutes. The VEINOPLUS switches OFF automatically after 20 minutes
- 7 **When to use :** daily or as needed (no limits, no risk of overuse). Especially recommended during and up to 2 weeks after long-haul flights
- 8 **OFF:** If for any reason you wish to switch OFF VEINOPLUS, push once the ON/OFF button (1)
- 9 **The effectiveness of VEINOPLUS depends on:**
 - The correct positioning and using electrodes marked VEINOPLUS PACK.
 - The correct adjustment of the intensity of stimulation, up to reaching light but deep pulsations of calf muscles.
 - If your skin is too dry, wet it with tap water, to further improve the effectiveness of stimulation.

The VEINOPLUS treatment may be even more effective when wearing knee high stockings or support socks during electrical stimulation. The electrodes must be placed directly on to the skin, and not on the stockings.

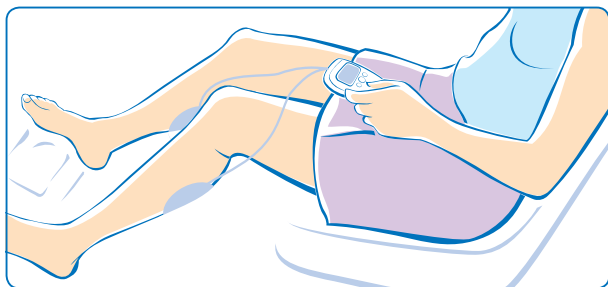

TECHNICAL DESCRIPTION

VEINOPLUS is a battery powered electrical muscle stimulator that delivers specific low frequency and low voltage currents. These currents are a highly developed synthesis of impulses. They provide safe and effective muscle pulsations in legs to facilitate venous blood return against gravity. VEINOPLUS is powered by a single 9V alkaline battery. Input power does not exceed 0.3W. **All parameters of the output impulses do not change throughout the life of the battery.**

Features (see picture on page 19):

- One push button for ON / OFF (1)
- Two push buttons for intensity control (2)
- An LCD screen displaying the intensity of stimulation (3), - A vertical bar flashes each time the muscle pumping occurs-
- Remaining time left to automatic stop (4),
- A battery icon on the screen flashes when the battery needs to be replaced (5)
- Counter of utilisations (6)
- One single insulated stimulation channel (7)
- Two electrodes (8)

An internal timer switches the device OFF after 20 minutes

Output parameters of VEINOPLUS:

- The low frequency current is modulated in a special pattern from 1 Hz to 250 Hz
- The waveform of the current impulses during use is quasi-symmetrical biphasic AC.
- The voltage waveform of the impulse is rectangular and monopolar.
- The time duration of output impulses ranges from 25 to 240 microseconds.
- During impulses, the instantaneous output voltage reaches a peak value of $45V_p \pm 10\%$, when loaded with impedance in a range from 250 ohms to 10'000 ohms

Maximum ratings of the VEINOPLUS output when loaded with 500 Ω resistance:

- The effective value of AC output voltage is less than 2V r.m.s over 5 seconds.
- The effective value of AC current intensity does not exceed 4 mA r.m.s. over 5 seconds and it may reach a peak value of $90\text{ mA} \pm 10\%$ during impulses.

- The maximum r.m.s. value of current density on recommended electrodes does not exceed 0.2 mA/cm²
- The maximum AC output power of VEINOPLUS is limited to 0.01 W r.m.s.
- The maximum DC output power of VEINOPLUS is limited to 0.0001 W.

Rates of muscle pulsations during use:

The rates of stimulated muscle pulsations are similar to heart beats. They are programmed to accelerate during each use from 60 BPM (Beats Per Minute) for the first 5 minutes of treatment, to 75 BPM for the following 5 minutes, then to 90 BPM for the next 5 minutes and finally to 105 BPM for the last 5 minutes of use session. These pulsation rates correspond to frequencies in a range from 1 Hz to 1.75 Hz.

ACCESSORIES

VEINOPLUS is supplied with all the accessories required for an easy, safe and effective treatment. These include **two VEINOPLUS PACK self-adhesive skin electrodes, one cable, one 9V alkaline battery and one instruction manual.** In compliance with transport regulations in some countries, the battery may not be delivered with the device.

Electrodes and how to use them:

The VEINOPLUS PACK electrodes are reusable. It is recommended that the same set of electrodes is used by the same person. Used electrodes should be replaced as soon as they no longer adhere or become dirty. Specific instructions for use and maintenance of the electrodes are included in their package.

Recommended electrodes:

VEINO PLUS has been clinically tested, and its effectiveness is optimal when VEINOPLUS PACK 8X13 electrodes are used. For effective and safe treatments it is recommended to use only the original electrodes branded VEINOPLUS PACK. No other brands or types of electrodes are recommended for use with VEINOPLUS. The replacement electrodes when purchased in pharmacies or elsewhere should be in original sealed packages VEINOPLUS PACK. If, by mistake any other types of electrodes are used with the VEINOPLUS, its effectiveness can be severely reduced but its safety will not be affected. This is due to inherent design of electronic circuitry inside the VEINOPLUS, which automatically limits the effective current density on electrode contact if smaller or larger size auto-adhesive electrodes are used by mistake. Metal plates for skin contacts instead of pre-gelled VEINOPLUS PACK electrodes can be used only by, and at the sole responsibility of health professionals.

The battery and its replacement:

When the 9v battery reaches its end-of-life, (voltage < 6V), the battery icon on the screen begins to flash. You should change the battery either at the end of the session or when the VEINOPLUS switches OFF.

To replace the battery no tools are needed, just open the cover on the back of the VEINOPLUS and insert a new battery observing its polarity. It is recommended to use 9V alkaline batteries of any type listed below: 6LR61, 6LF22, AM6, MN1604 or GP 1604. If other batteries than those recommended are used, the VEINOPLUS may cease functioning effectively or prematurely, but its safety will not be affected.

The electrode cable and its replacement:

The cable supplied with VEINOPLUS can be replaced, if needed, through your local VEINOPLUS distributor.

RISKS ASSOCIATED WITH DISPOSAL OF ACCESSORIES OR PRODUCT

There are no risks associated with handling and disposal of waste created by VEINOPLUS product or its accessories, except for the batteries. The following precautions relate to batteries:

- The batteries must not be exposed to temperatures above 65° C
- When your device is not used for a long period of time, remove the battery
- The alkaline battery used in VEINOPLUS must not be recharged as it may explode
- The battery must not be disposed into fire as it may explode
- The battery must not be short circuited, as it may cause burns or become a fire hazard
- The battery may explode, catch fire or cause burns if it is incorrectly handled
- Waste batteries must be disposed of properly, in order to preserve the environment.

ENVIRONMENTAL CONDITIONS FOR USE, STORAGE AND TRANSPORT

- Do not use VEINOPLUS in the presence of working electro-surgery devices
- Do not use VEINOPLUS near (< 0.5 m) working microwave ovens
- The VEINOPLUS did not produce excessive electromagnetic interference (EMI) in tests according to EN 60601-1-2: 2001 standard. However, EMI may still occur in certain sensitive environments
- VEINOPLUS must be used in an ambient temperature range of +5 to +40°C and RH below 70%

- VEINOPLUS must be stored and transported in temperatures from -5 to +40°C and RH below 70%.

SERVICE

The VEINOPLUS device requires no routine maintenance nor calibration. When needed, for occasional cleaning / disinfecting of the plastic covers, use alcohol wipes.

All after sale services are handled by Ad Rem Technology or authorized representatives to whom, on request, the supplier will make available component lists, diagrams, descriptions and materials necessary for repairs. To obtain service, please provide the year of manufacture and a serial number of your VEINOPLUS. The year of manufacture can be read as the first four digits and the serial number as the last five digits on the label placed under the battery inside of your VEINOPLUS.

WARRANTY

VEINOPLUS is guaranteed for 12 months against any manufacturing defect, except for the battery, glass breakage and normal wear and tear of electrodes, as well as any damage due to abusive handling or removing the plastic covers of VEINOPLUS by unauthorised third parties.


To obtain the repair or replacement of your unit under guarantee, please send your unit with its sales slip to the MANUFACTURER and EU IMPORTER:

Ad Rem Technology

22, rue Cambon - 75001 Paris - France

tél +33 (0)1 42 60 00 22 - fax +33 (0)1 42 60 00 63

www.adremtechnology.com

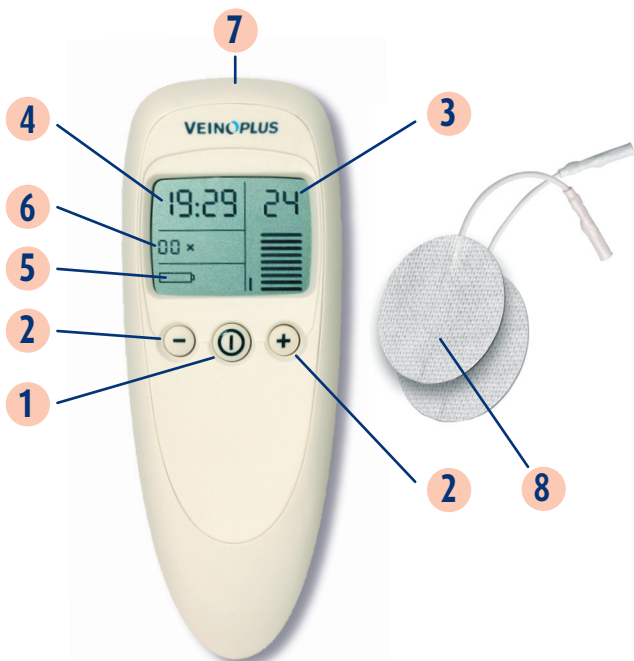

- 1 Marche/arrêt - *ON/OFF*
- 2 Réglage d'intensité - *Intensity control*
- 3 Niveau d'intensité - *Intensity of stimulation*
- 4 Durée du traitement restant - *Remaining time*
- 5 Usure de la pile - *Battery replacement display*
- 6 Compteur d'utilisations - *Usage counter*
- 7 Prise cable - *Cable jack*
- 8 Électrodes - *Electrodes*

VEINOPLUS

Ad Rem Technology

22, rue Cambon - 75001 Paris - France

tél +33 (0)1 42 60 00 22

fax +33 (0)1 42 60 00 63

www.adremtechnology.com

